
One Person Lab App 首次安装图文教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 8 月 22 日

目录

One Person Lab App 首次安装图文教程	3
准备清单	3
1. 安装 One Person Lab	3
2. 手工安装 DMG（可选）	4
3. 完成首次检查	5
4. 登录或确认模型访问	6
5. 开始第一项工作	8
6. 后续调整与更新	8
常见问题	9

One Person Lab App 首次安装图文教程

macOS 下载、安装与首次设置

适用对象：医生、PI、课题负责人及合作团队成员；不要求计算机基础。

本文按“安装 App、完成首次检查、登录或确认模型访问、进入工作台”的顺序说明 One Person Lab App 的首次使用。

下载最新版本：<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/latest>

macOS 首次安装推荐下载 Full DMG，它预置 Base 和 Package seeds，可显著减少首启时的在线下载。Standard 适合稳定版升级，或网络环境非常好的首次安装。不要把可变分支中的安装脚本直接通过管道交给 shell 执行。

准备清单

- 一台 Apple Silicon (arm64) Mac；当前 macOS App 不支持 Intel Mac。
- 稳定网络，用于下载安装包、账户登录、更新和模型访问。Full 也需要联网完成登录和使用在线模型。
- 如果选择 Standard，需要很好的网络环境来下载 Base、Packages 和其他模块，并能访问所选模型服务；例如使用 OpenAI 时，需要能够直连 OpenAI。安装或首次检查异常时，先排查网络、代理、DNS 和目标服务连通性。
- 一个本机工作目录，用于保存项目材料和生成结果。
- 可选：可用的 OPL Gateway 账户，或兼容方式所需的 API Key。本机已有可用 Codex 配置时可以直接重新检测。

1. 安装 One Person Lab

首次安装推荐 Full。 打开上面的 Latest Release 页面，在 **Assets** 区域下载 One-Person-Lab-Full-<版本>-mac-arm64.dmg。Standard 会先成为 Latest，Full 随后追加到同一 Release/tag；刚发布时如果暂未看到 Full，请等待追加发布完成并刷新 Assets，不要改下 ZIP、Source code 或其他元数据文件。

已经完成首次安装、准备升级，或确认网络环境足以在线下载全部模块时，可以打开 macOS “终端”，粘贴并运行下面的 Homebrew Standard 安装命令：

```
brew install --cask gaofeng21cn/one-person-lab/one-person-lab
```

这条命令适用于 Standard 联网安装和稳定版升级。Homebrew Cask 会把 App 安装到“应用程序”，但不会自动打开 App，也不应被当作清理 quarantine 的入口。安装完成后运行：

```
open -a "One Person Lab"
```

App 启动后可直接跳到第 3 步。教程只保留 Latest 入口，不展示会随发版过期的版本截图或精确 tag URL。

- 当前只提供 Apple Silicon (arm64) 安装包。
- 不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。
- Release 页面版本号会持续变化，以标记为 Latest 的稳定版为准。
- 首次安装选择 One-Person-Lab-Full-< 版本 >-mac-arm64.dmg；它包含 Base 和 Package seeds。
- Standard 选择 One-Person-Lab-< 版本 >-mac-arm64.dmg，安装过程中需要联网下载模块，网络要求更高。
- Full 不是独立更新频道，安装后的 App 更新仍走 Standard 更新路径。

从已审阅的 source checkout 开发或恢复时可以运行仓库内的 `./install.sh`。普通安装 不要从可变 main 分支下载后直接执行；需要终端入口时，从 Latest Release 下载唯一 公开 installer `opl-install.sh`。它会先解析并绑定当前精确 Release：

```
curl -fLO https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/latest/download/
↪ opl-install.sh
chmod 0755 opl-install.sh
./opl-install.sh --stable-macos-install --full --yes
```

该 installer 会在挂载 DMG 或替换 App 前校验所选 Release 的 component manifest、installer 与 DMG 的摘要。

2. 手工安装 DMG (可选)

仅在第 1 步选择 Standard 或 Full DMG 时执行本步。打开 DMG，将 **One Person Lab** 拖到 **Applications**。复制完成后关闭 DMG 窗口，再从“应用程序”启动 App。

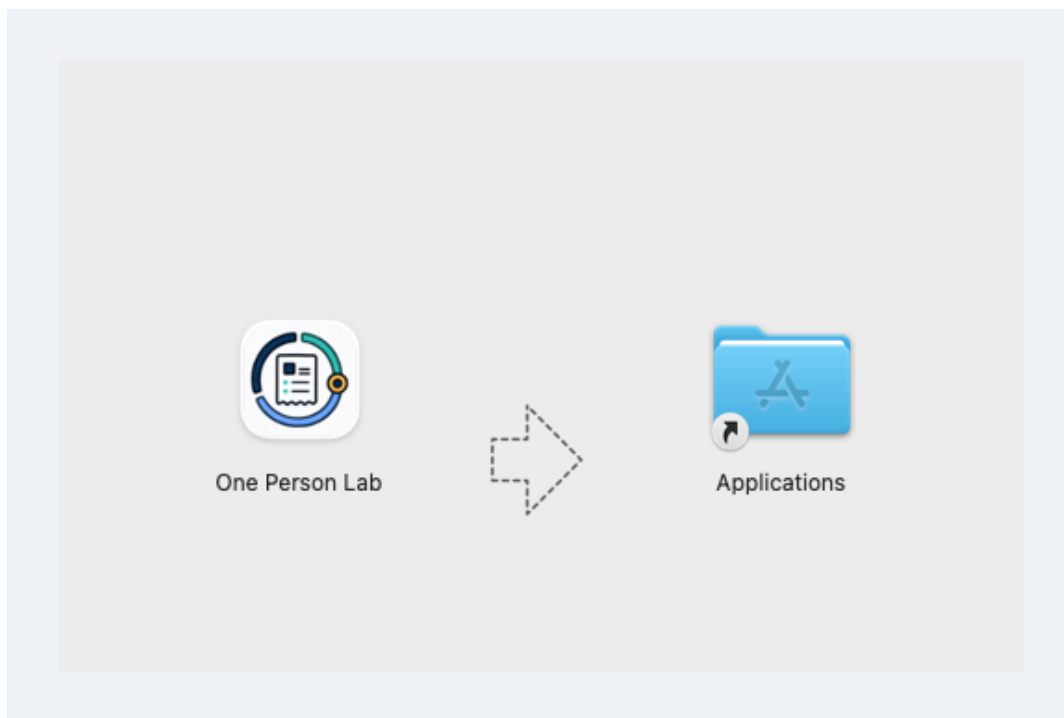


图 1: 将 One Person Lab 拖入 Applications

首次打开如出现 macOS 安全提示，按系统提示确认。不要长期在 DMG 挂载窗口中直接运行 App；如果系统持续阻止打开，可改用第 1 步的 Latest opl-install.sh，由它完成摘要校验、复制、quarantine 清理和启动。

3. 完成首次检查

首次启动后，OPL 会先检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度。



图 2: 等待 OPL 完成首次检查

检查期间可以先点击右上角“进入 OPL”，但这不会自动完成尚未配置的项目。出现“需要处理”时，按页面给出的下一步操作即可；技术细节默认折叠，不要求普通用户理解底层工具名称。

4. 登录或确认模型访问

模型访问显示“缺失”时，根据实际情况处理：

1. **账户登录（默认）**：填写 OPL Gateway 的“邮箱”和“密码”，点击“登录并继续”。密码只用于本次登录，不会保存在 App 中。
2. **确认模型访问**：登录成功并出现“已登录 OPL Gateway”后，点击“设为模型访问方式”。账户登录本身不会替用户完成这项确认。
3. **重新检测已有配置**：本机 Codex/OpenAI 已登录或已有可用配置时，点击“重新检测已有配置”。这是独立检测操作，不是第三种登录方式。
4. **API Key（兼容方式）**：只有需要手工密钥接入时才切换到“API Key”，按团队提供的方式填写。
5. **暂时进入工作台**：当前没有可用账户或密钥时，可先点击右上角“进入 OPL”；需要模型的功能仍会提示完成访问设置。



图 3: 默认使用账户登录，也可切换 API Key 或重新检测已有配置



图 4: 登录成功后确认将 OPL Gateway 设为模型访问方式

当前版本只把 gateway.medopl.com 作为 OPL Gateway 的可信服务主机：账户登录、账户信息和用量查看使用 <https://gateway.medopl.com/api/v1>，模型访问使用 <https://gateway.medopl.com/v1>。新配置会由 App 自动写入 provider ID oplgateway 和上述模型地址，无需手工填写 Base URL。

本机已有 OPL Gateway Codex 配置时，App 会按 Gateway 地址原位复用现有条目，不会隐式迁移旧配置，也不会改写原 provider ID、名称或 Base URL；这是为了保留既有会话和配置关联。

请勿把密码或完整 API Key 发送到群聊、公开文档或代码仓库，也不要再在截图中展示。

5. 开始第一项工作

进入主界面后，可以直接描述目标，也可以选择当前安装的 Package 动态提供的工作入口。8.22 界面中的 当前入口包括“开展科研工作”“开展基金申请工作”“制作视觉交付物”和“构建与迭代智能体”；后续安装、启用或移除 Package 时，首页会随 Framework 的实时投影变化，不维护固定入口清单。本教程以科研任务为例。



图 5: 在主界面描述目标或选择当前 Package 提供的工作入口

第一条任务建议同时说明目标和材料位置，例如：

我有一批已经脱敏的肺结节随访数据，材料在当前项目的 raw_data 文件夹。请先判断最值得推进的研究问题，并说明还缺哪些证据。

涉及患者或敏感研究数据时，应先完成脱敏，并遵守所在机构的数据管理和伦理要求。

6. 后续调整与更新

- 管理 Gateway 账户和访问状态：打开“设置 -> 账户与访问”。
- 选择模型：打开“设置 -> 模型”。
- 调整工作目录：打开“设置 -> 工作区”。
- 检查 App 更新：打开“设置 -> 关于”，再点击“检查更新”。
- 再次打开 App 时，已经完成的首启设置会保留，不需要重复配置。

常见问题

- **Intel Mac 可以安装吗？** 当前不支持。请使用 Apple Silicon (arm64) Mac。
- **已经在用 Codex，还需要登录 OPL Gateway 吗？** 不需要。点击 “重新检测已有配置” 即可确认现有模型访问。
- **暂时没有 Gateway 账户或 API Key 怎么办？** 可以先 “进入 OPL”，后续从 “设置 -> 账户与访问” 完成配置。
- **下载页面里文件很多，应该选哪个？** 首次安装选择 One-Person-Lab-Full-< 版本 >-mac-arm64.dmg。刚发版时 Full 可能正在向同一 Release 追加，请等待它出现；不要下载 ZIP、blockmap、YML、JSON 或 Source code。
- **Standard 安装或首次检查卡住怎么办？** Standard 需要在线下载 Base、Packages 和其他模块。先确认网络、代理和 DNS 正常，并检查所选模型服务是否可达；例如使用 OpenAI 时，需要能够直连 OpenAI。网络条件不稳定时改用 Full 首次安装。
- **打不开 App 怎么办？** 确认 App 已复制到 /Applications 并按 macOS 安全提示允许打开；仍无法启动时，使用同 tag opl-install.sh 安装。
- **账户登录失败怎么办？** 先确认邮箱和密码正确，并检查 gateway.medopl.com 的网络连通性；反馈问题时提供操作系统、发生步骤和不含密码或 API Key 的报错截图。
- **需要自己选择具体模型版本吗？** 通常不需要；需要调整时打开 “设置 -> 模型”。